



CIRCBI


CENTRE INTERNATIONAL DE RÉFÉRENCE "CHANTAL BIYA"
POUR LA RECHERCHE SUR LA PRÉVENTION ET LA PRISE EN CHARGE DU **VIH/SIDA**

CENTRE INTERNATIONAL DE RÉFÉRENCE CHANTAL BIYA

MEDISYS EID

Guide utilisateur

Plateforme de gestion des données du diagnostic
précoce du VIH chez l'enfant

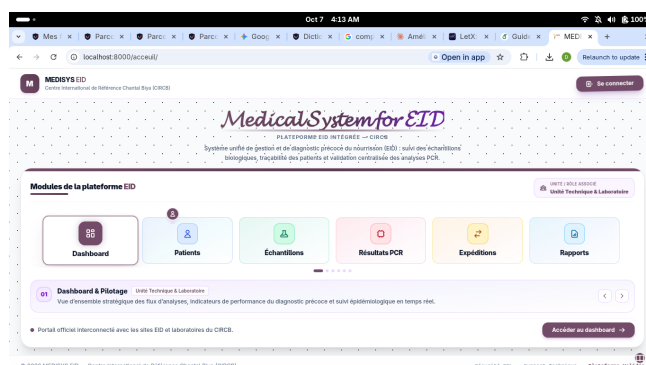

Informations documentaires

Document	Guide utilisateur MEDISYS EID
Application	MEDISYS EID
Organisation	Centre International de Référence Chantal Biya (CIRCB)
Version	1.1
Année	2026
Statut	Version de référence
Public cible	Utilisateurs de la plateforme
Rédaction	Équipe projet
Validation	[à compléter]

Important

Ce document décrit les principales fonctionnalités de **MEDISYS EID** et présente les procédures à suivre pour utiliser correctement la plateforme.

Historique des versions

Version	Date	Description	Responsable
1.0	2026	Première version du guide utilisateur	Équipe projet
1.1	2026	Refonte de la mise en forme, ajout du flux de travail global, des conventions et de la gestion des notifications	Équipe projet

Avant-propos

Le présent guide accompagne les utilisateurs dans la prise en main de la plateforme **MEDISYS EID**. Il présente les principales fonctionnalités de l'application, les procédures de travail et les bonnes pratiques à respecter lors de la saisie, de la consultation, de la validation et de l'exploitation des données.

L'objectif est de permettre à chaque utilisateur de travailler de manière autonome, tout en garantissant la qualité, la cohérence et la traçabilité des informations enregistrées.

Conventions utilisées dans ce guide

- Les noms de boutons, de menus et de modules sont présentés ainsi : **Nouveau dossier**.
- Les procédures sont découpées en **étapes** numérotées.
- Les encadrés attirent l'attention sur un point particulier :

Important

Information essentielle à retenir.

Attention

Risque d'erreur, action irréversible ou règle à respecter impérativement.

Bon à savoir

Conseil pratique ou précision utile.

Table des matières

Informations documentaires	i
Historique des versions	i
Avant-propos	ii
1 Présentation de MEDISYS EID	1
1.1 Introduction	1
1.2 Objectifs de la plateforme	1
1.3 Principaux modules	1
1.4 Architecture fonctionnelle	2
1.5 Flux de travail global	2
2 Accès à la plateforme	3
2.1 Page de connexion	3
2.2 Authentification	3
3 Tableau de bord	4
3.1 Présentation	4
3.2 Navigation	4
4 Gestion des dossiers patients	6
4.1 Présentation	6
4.2 Rechercher un patient	6
4.3 Créer un dossier patient	6
4.4 Consulter un dossier	7
5 Gestion des échantillons	8
5.1 Présentation	8
5.2 Création d'une fiche échantillon	8
5.3 Consultation des échantillons	9
5.4 Fiche d'expédition	9
5.4.1 Consultation des fiches d'expédition	10
5.4.2 Création d'une fiche d'expédition	10
5.4.3 Ajout des échantillons par code	11
5.4.4 Contrôle et vérification des codes patients	12
5.5 Registre de collecte	13
6 Gestion des résultats	14
6.1 Saisie des résultats	14

6.2	Consultation des résultats	15
6.3	Validation des résultats	15
6.4	Édition et génération des rapports	16
7	Ressources humaines	17
7.1	Présentation	17
8	Utilisateurs et permissions	18
8.1	Rôles utilisateurs	18
8.2	Principe des permissions	18
9	Bonnes pratiques	20
9.1	Qualité des données	20
9.2	Sécurité et confidentialité	20
10	Résolution des problèmes	21
11	Assistance et support	22
A	Glossaire	23
B	Checklist utilisateur	24

Table des figures

1.1	Vue fonctionnelle simplifiée de MEDISYS EID	2
1.2	Parcours d'un échantillon dans MEDISYS EID	2
2.1	Page de connexion à MEDISYS EID	3
3.1	Tableau de bord principal	4
3.2	Menu de navigation et accès aux modules	5
4.1	Recherche d'un patient	6
4.2	Formulaire de création et dossier médical du patient	6
4.3	Consultation et gestion de la liste des dossiers patients	7
5.1	Formulaire de saisie d'un échantillon	8
5.2	Liste et suivi des échantillons enregistrés	9
5.3	Liste des fiches d'expédition	10
5.4	Formulaire de création d'une fiche d'expédition	10
5.5	Saisie et association des codes échantillons à la fiche	11
5.6	Liste récapitulative des codes patients du lot	12
5.7	Vérification de conformité des codes patients avant validation	12
5.8	Registre de collecte des échantillons	13
6.1	Saisie et modification d'un résultat PCR	14
6.2	Liste des patients avec résultats disponibles	15
6.3	Validation d'un résultat	15
6.4	Sélection et génération des rapports d'activité	16
7.1	Gestion des ressources humaines	17
8.1	Gestion des rôles et des comptes utilisateurs	18

Présentation de MEDISYS EID

1.1 Introduction

MEDISYS EID est une plateforme destinée à soutenir la gestion informatisée des données relatives au diagnostic précoce du VIH chez l'enfant (EID). Elle centralise les informations relatives aux patients, aux échantillons, aux expéditions, aux résultats de laboratoire et aux processus de suivi.

1.2 Objectifs de la plateforme

- centraliser les données ;
- améliorer la traçabilité des échantillons ;
- faciliter la gestion des dossiers patients ;
- améliorer la qualité des données ;
- faciliter la consultation des résultats ;
- renforcer le suivi des activités ;
- faciliter la production d'informations utiles à la décision.

1.3 Principaux modules

Selon les droits attribués à l'utilisateur, les fonctionnalités peuvent comprendre les modules suivants.

Module	Rôle
Tableau de bord	Vue d'ensemble de l'activité
Dossiers patients	Création, recherche et consultation des dossiers
Échantillons	Suivi des échantillons et fiches de prélèvement
Fiches d'expédition	Suivi des envois d'échantillons
Registre de collecte	Journal des échantillons collectés
Résultats	Saisie, consultation et validation des résultats
Ressources humaines	Gestion des acteurs et des utilisateurs
Utilisateurs et permissions	Gestion des accès et des rôles

1.4 Architecture fonctionnelle

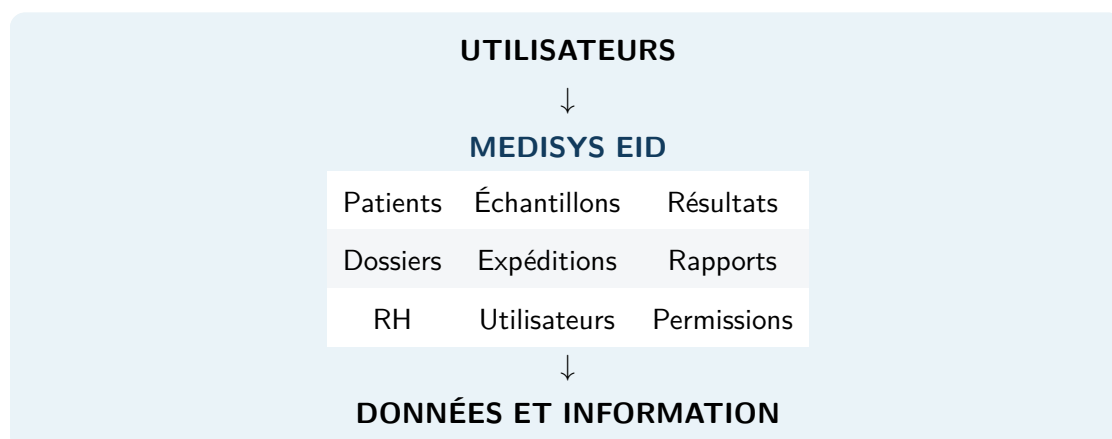


Figure 1.1 – Vue fonctionnelle simplifiée de MEDISYS EID

1.5 Flux de travail global

Le schéma ci-dessous résume le parcours d'un échantillon dans la plateforme. Chaque étape correspond à un module décrit dans les chapitres suivants.

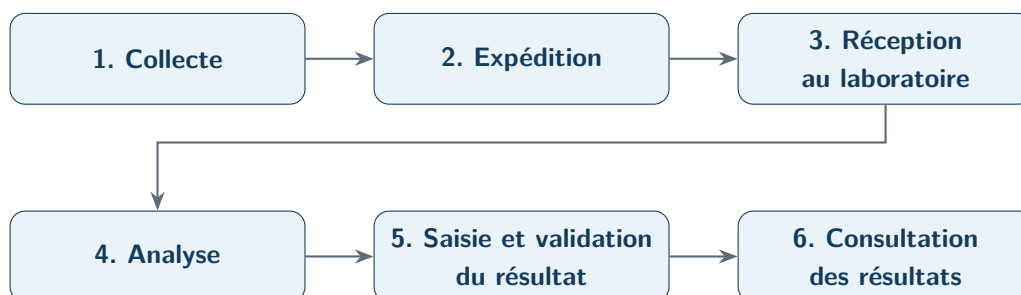


Figure 1.2 – Parcours d'un échantillon dans MEDISYS EID

Accès à la plateforme

2.1 Page de connexion

L'utilisateur accède à la plateforme à partir de l'adresse fournie par l'administrateur du système.

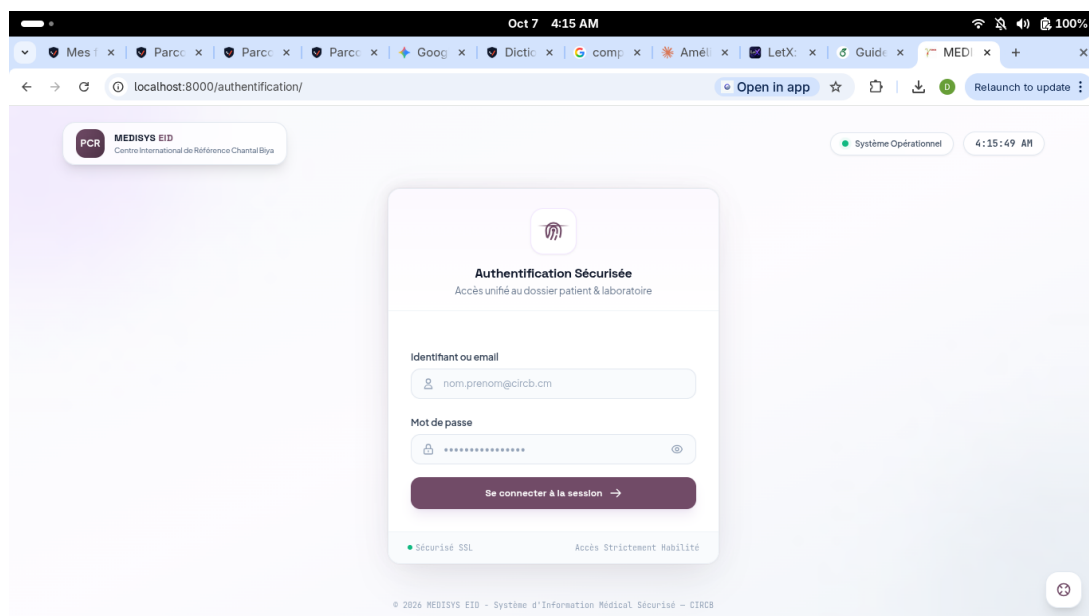


Figure 2.1 – Page de connexion à MEDISYS EID

2.2 Authentification

Étape 1

Saisir le nom d'utilisateur ou l'identifiant fourni.

Étape 2

Saisir le mot de passe.

Étape 3

Cliquer sur le bouton **Se connecter**.

Attention

Les identifiants sont personnels. Ils ne doivent être communiqués à aucun autre utilisateur.

Tableau de bord

3.1 Présentation

Après authentification, l'utilisateur accède au tableau de bord principal.

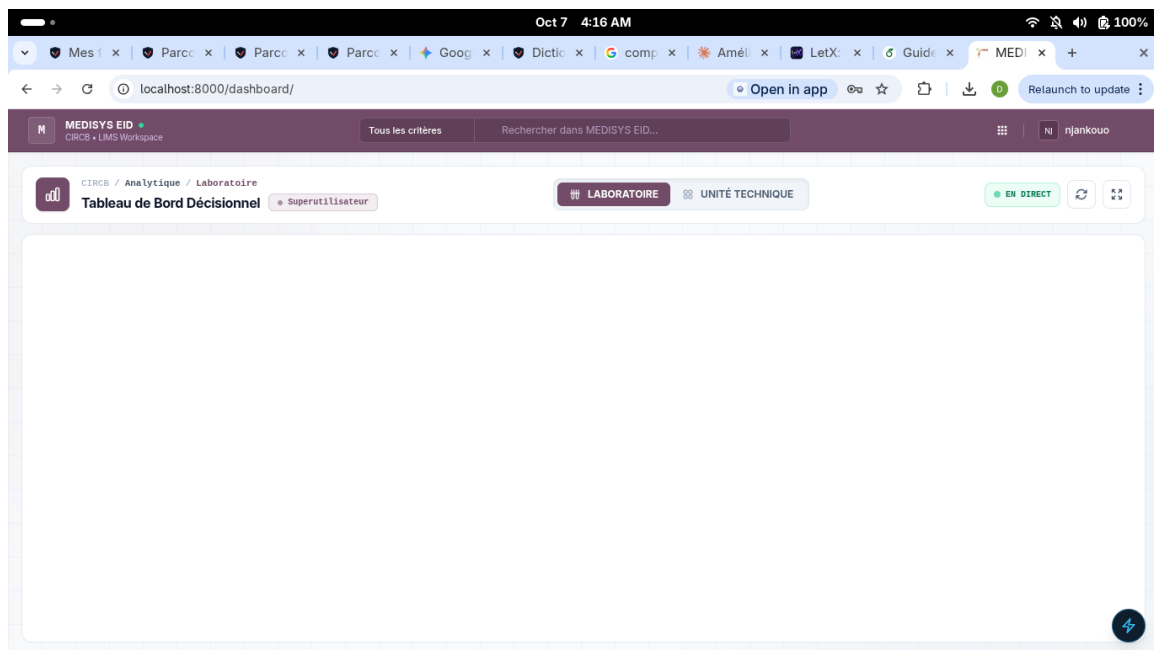


Figure 3.1 – Tableau de bord principal

3.2 Navigation

La barre de navigation permet d'accéder aux différents modules disponibles pour le compte de l'utilisateur.

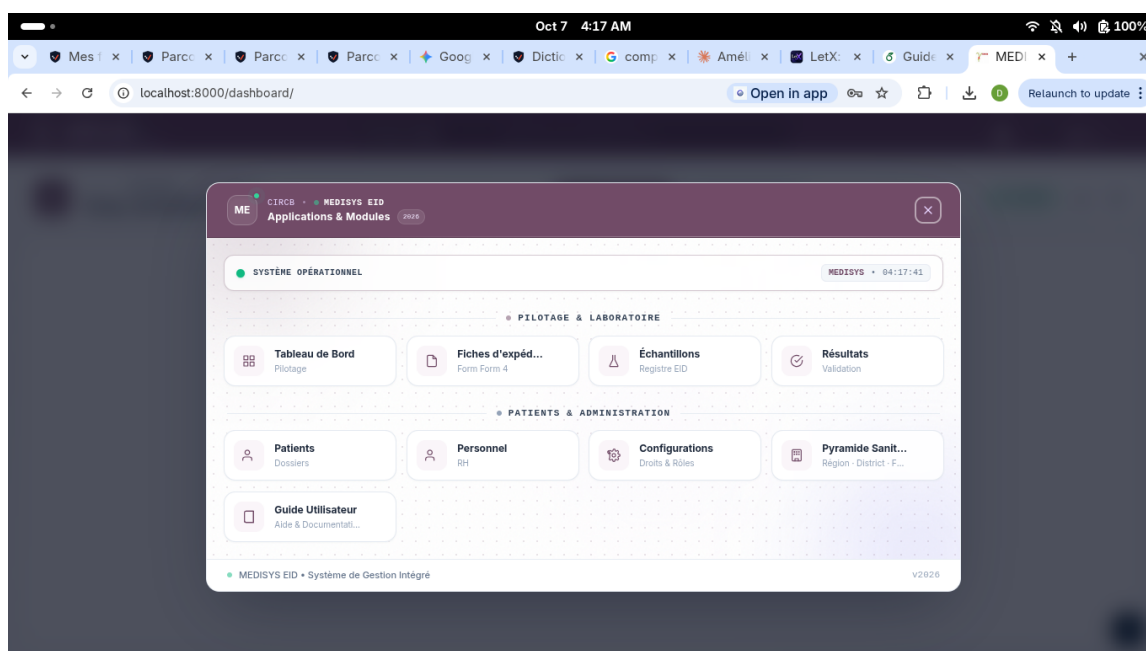


Figure 3.2 – Menu de navigation et accès aux modules

Bon à savoir

Les fonctionnalités visibles dépendent des droits et permissions attribués au compte utilisateur.

Gestion des dossiers patients

4.1 Présentation

Le module **Dossiers** permet d'enregistrer, consulter et gérer les informations relatives aux patients pris en charge dans le système.

4.2 Rechercher un patient

La recherche peut être effectuée à partir des critères disponibles dans l'application.



Figure 4.1 – Recherche d'un patient

Attention

Avant de créer un nouveau dossier, rechercher systématiquement le patient afin d'éviter la création de doublons.

4.3 Créer un dossier patient

A screenshot of the patient creation form in the MEDISYS EID application. The form is titled "DOSSIER PATIENT #MEDISYS EID" and includes a patient name "ADAMA" and a patient code "CEN-BIY-CHU-PT-1400". The form is divided into several sections: "INFORMATIONS PATIENT" (Date de Naissance: 04/08/2024, Sexe: M, Structure: -), "NOUVEAU PRÉLÈVEMENT" (Saisir une nouvelle fiche d'investigation PCR pour cet enfant ?), "HISTORIQUE DES ANALYSES PCR" (TOTAL : 3 ÉCHANTILLON(S)), "STATUT LABORATOIRE" (RÉSULTAT : DETECTE), "DONNÉES ENFANT & CLINIQUE" (Poids: - kg, Rang de naissance: -, Prophylaxie ARV: Autre/Other, Porte d'entrée: Non spécifiée, Raison prélèvement: Suivi systématique, Symptômes: Non), and "STATUTS NUTRITIONNEL & MÉDICAMENTEUX" (Allaitement: Non, Cotrimoxazole: Non, Traitement TARV: Non). There is a button "SAISIR UN ÉCHANTILLON" and a "Relaunch to update" button.

Figure 4.2 – Formulaire de création et dossier médical du patient

- Étape 1

Accéder au module **Dossiers** .
- Étape 2

Cliquer sur **Nouveau dossier** .
- Étape 3

Renseigner les informations demandées.
- Étape 4

Vérifier les informations saisies.
- Étape 5

Valider l'enregistrement.

4.4 Consulter un dossier

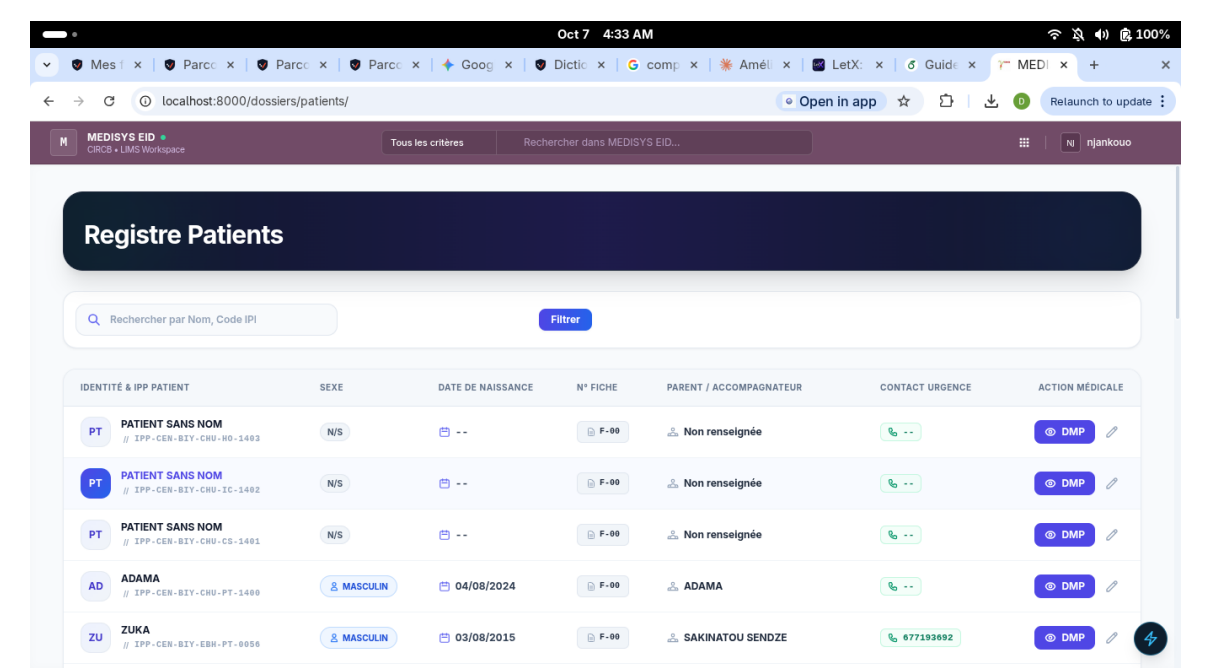


Figure 4.3 – Consultation et gestion de la liste des dossiers patients

Gestion des échantillons

5.1 Présentation

Le module **Échantillons** assure la traçabilité des échantillons depuis leur collecte jusqu'à leur réception, leur traitement et la disponibilité des résultats.

5.2 Création d'une fiche échantillon

The screenshot displays the 'MEDISYS EID' interface for sample entry. At the top, a progress bar indicates 'SAISIE ÉCHANTILLONS' is 75% complete (3/4 steps). The main form is divided into sections: 'NOUVEL ÉCHANTILLON DE LABORATOIRE' with a description, a 'FICHE RÉFÉRENCE' (051026-5096), and a 'CODE DE L'ÉCHANTILLON' field (1400024673). Below this is a section for 'RÉGION / region' (CENTRE), 'DISTRICT DE SANTÉ / district' (BIYEM ASSI), 'STRUCTURE (FOSA) / facility' (CHU), and 'PORTE D'ENTRÉE / point of entry'. A 'FOSA METADATA' section is also present. At the bottom, there is a 'CODE D'IDENTIFICATION / identification code' section with fields for REGION (CEN), DISTRICT (BIY), FOSA (CHU), PT (..), and NUM (....).

Figure 5.1 – Formulaire de saisie d'un échantillon

Étape 1

Accéder au module **Échantillons**.

Étape 2

Sélectionner l'action permettant de créer une nouvelle fiche.

Étape 3

Renseigner les informations relatives au patient et à l'échantillon.

Étape 4

Vérifier les informations.

Étape 5

Enregistrer la fiche.

5.3 Consultation des échantillons

The screenshot shows the MEDISYS EID web application interface. At the top, there's a navigation bar with the MEDISYS EID logo and a search bar. Below this, the main heading is 'Registre Central des Échantillons En Attente de Resultat(s)'. There's a '+ Saisir échantillon' button. Below the heading, there's a 'FILTRES DES ÉCHANTILLONS' section with input fields for 'NOM DU PATIENT', 'CODE ÉCHANTILLON', 'CODE PATIENT', and 'DATE PRÉLEVEMENT'. An 'Appliquer les filtres' button is at the bottom right of the filter section. Below the filters is a table with the following columns: CODE ÉCHANTILLON, PATIENT & MÈRE, FORMATION SANITAIRE (FOSA), DATE PRÉLEVEMENT, RE-PRÉLEVEMENT ?, STATUT RÉSULTAT, and ACTION. The table contains four rows of sample data.

CODE ÉCHANTILLON	PATIENT & MÈRE	FORMATION SANITAIRE (FOSA)	DATE PRÉLEVEMENT	RE-PRÉLEVEMENT ?	STATUT RÉSULTAT	ACTION
0 #1000003010	Mère : [Masqué]	CASS NKOLDONGO		NON	En attente	[Icones]
0 #1000000101	Mère : [Masqué]	FONDATION CHANTAL BIYA ...		NON	En attente	[Icones]
644446 #1000000005	Mère : [Masqué]	FONDATION CHANTAL BIYA ...		NON	En attente	[Icones]
0 #1000000470	Mère : [Masqué]	CS ESPOIR MBALLA 5		NON	En attente	[Icones]

Figure 5.2 – Liste et suivi des échantillons enregistrés

5.4 Fiche d'expédition

Le sous-module **Fiches d'expédition** permet d'organiser et de tracer l'envoi des lots d'échantillons vers le laboratoire de référence.

5.4.1 Consultation des fiches d'expédition

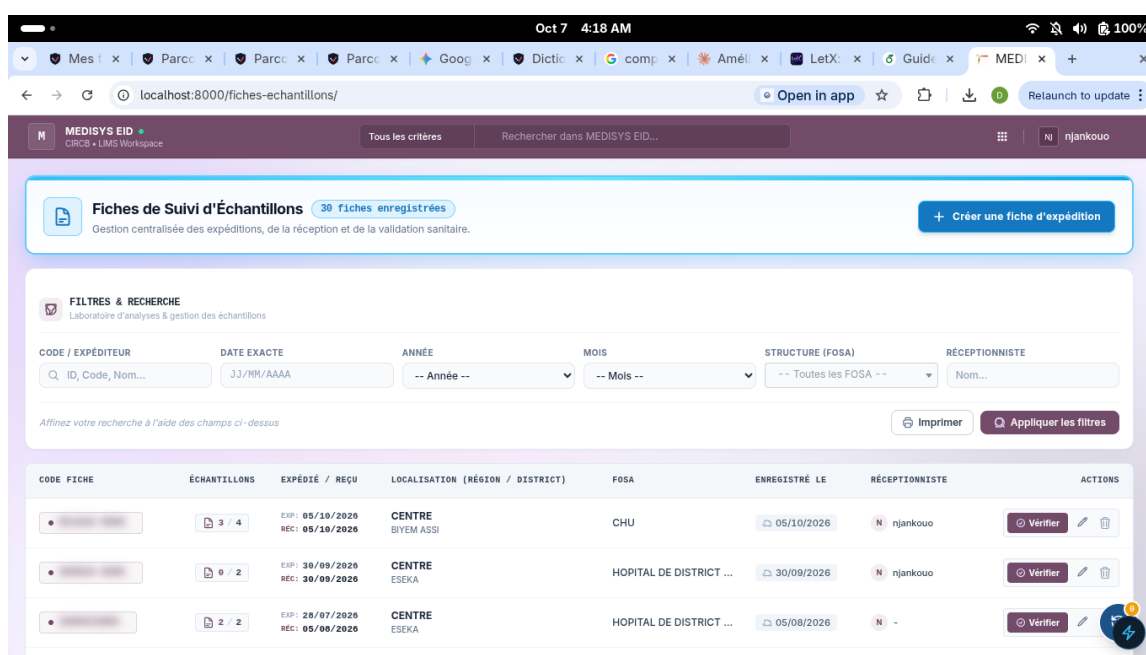


Figure 5.3 – Liste des fiches d'expédition

5.4.2 Création d'une fiche d'expédition

The screenshot shows the 'Fiche d'Expédition des Échantillons & Résultats' (Sample Delivery and Results) form. The form is titled 'Form for results / samples delivery (Form 4)'. It includes fields for 'CODE FICHE ÉCHANTILLON' (071026-5997), 'Date d'enregistrement' (07-10-2026), 'Région / Region', 'District de Santé / Health District', 'Formation Sanitaire / Hospital', 'Expéditeur & Contact', 'Date d'expédition', 'Nombre d'Échantillons / Résultats', 'Nom & Contact du Transporteur', and 'Moyen de transport'.

Figure 5.4 – Formulaire de création d'une fiche d'expédition

Étape 1

Accéder au menu **Fiches d'expédition**.

Étape 2

Cliquer sur le bouton de création d'une nouvelle expédition.

Étape 3

Sélectionner la formation sanitaire d'origine et le laboratoire de destination.

Étape 4

Renseigner la date et les informations du transporteur.

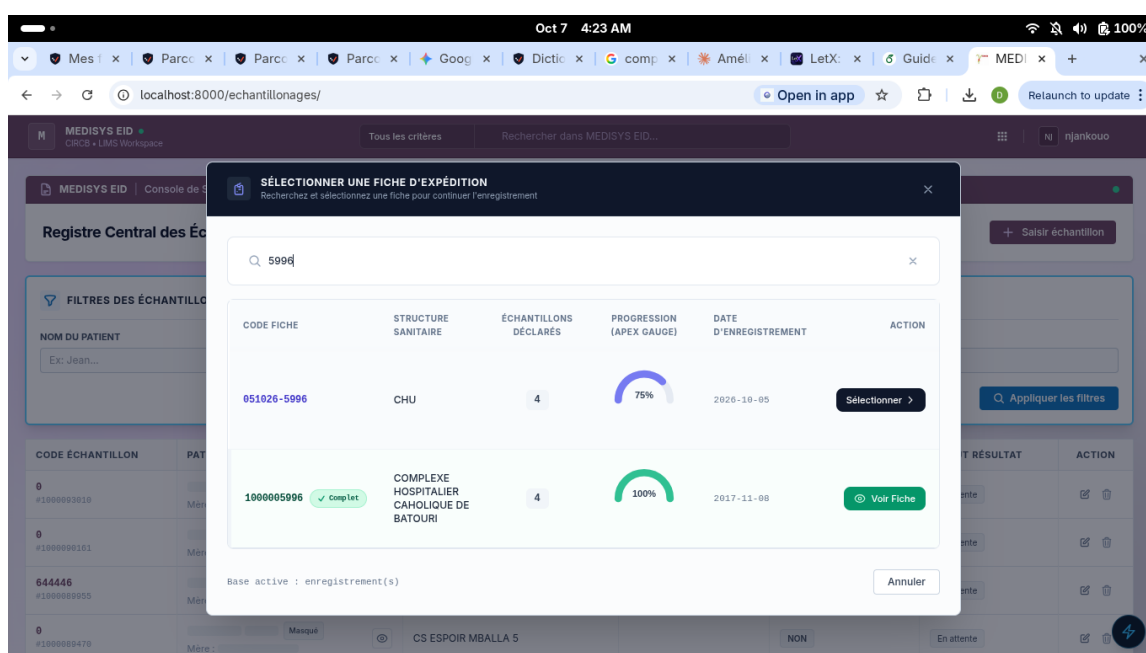
5.4.3 Ajout des échantillons par code

Figure 5.5 – Saisie et association des codes échantillons à la fiche

Étape 5

Saisir ou scanner le code de chaque échantillon à inclure dans le lot.

Étape 6

Ajouter l'échantillon au bordereau d'expédition.

5.4.4 Contrôle et vérification des codes patients

The screenshot shows the 'FICHE D'ECHANTILLON N° 1400005996' page. It displays patient information for ADAMA TRAORE, a unique identification code (CEN-BIY-CHU-PT-1400), and a history of three PCR analyses. The first analysis (Code Ech: 95000) is marked as 'DETECTE', while the other two are 'En attente'.

#	Code Ech	Prélèvement	Examen	Résultat
#3	Code Ech : 95000	06-10-2026	ABBOTT REALTIME HIV-1 QUALITATIVE ASSAY USING DBS FOR EID	DETECTE
#1	Code Ech : 70000	05-10-2026	ABBOTT REALTIME HIV-1 QUALITATIVE ASSAY USING DBS FOR EID	En attente
#2	Code Ech : 90000	05-10-2026	ABBOTT REALTIME HIV-1 QUALITATIVE ASSAY USING DBS FOR EID	En attente

Figure 5.6 – Liste récapitulative des codes patients du lot

The screenshot shows the 'Vérification des Échantillons & Codes' screen. It includes a table for 'GRILLE DE SAISIE PAR LOTS' with columns for N°, CODE STRUCTURE, PORTE D'ENTRÉE, and SAISIE CODE PATIENT & STATUT. The table is pre-filled with the code structure 'CEN / BIY / CHU' for four rows. A button at the bottom right says 'VALIDER LA LISTE DES CODES PATIENTS'.

N°	CODE STRUCTURE (RÉGION / DISTRICT / PDSA)	PORTE D'ENTRÉE	SAISIE CODE PATIENT & STATUT
01	C E N / B I Y / C H U		□ □ □ □ ○
02	C E N / B I Y / C H U		□ □ □ □ ○
03	C E N / B I Y / C H U		□ □ □ □ ○
04	C E N / B I Y / C H U		□ □ □ □ ○

Figure 5.7 – Vérification de conformité des codes patients avant validation

Étape 7

Vérifier la concordance de l'ensemble des codes patients et échantillons.

Étape 8

Valider et éditer la fiche d'expédition accompagnant le colis.

5.5 Registre de collecte

The screenshot shows the MEDISYS EID web application interface for sample collection. The browser address bar shows the URL: localhost:8000/saisir-echantillon/1400005997/. The application header includes the MEDISYS EID logo, a search bar, and a user profile icon labeled 'njankouo'. The main content area is divided into several sections:

- SAISIE ÉCHANTILLONS**: A progress indicator showing 75% completion for 3 out of 4 samples.
- NOUVEL ÉCHANTILLON DE LABORATOIRE**: A section for registering clinical specifications, PCR follow-up, and patient data.
- FICHE RÉFÉRENCE**: A reference card showing the number 051026-5996.
- CODE DE L'ÉCHANTILLON**: A field for the sample code, currently displaying '1400024673'.
- RENSEIGNEMENTS SUR LA FORMATION SANITAIRE / HEALTH FACILITY INFORMATION**: A section for entering facility details, including Region (CENTRE), District (BIYEM ASSI), Structure (CHU), and Point of Entry (Sélectionner...).
- 3. CODE D'IDENTIFICATION / identification code**: A section for entering the identification code, with fields for Region (CEN), District (BIY), FOSA (CHU), PT (..), and NUM (....).

Figure 5.8 – Registre de collecte des échantillons

Gestion des résultats

6.1 Saisie des résultats


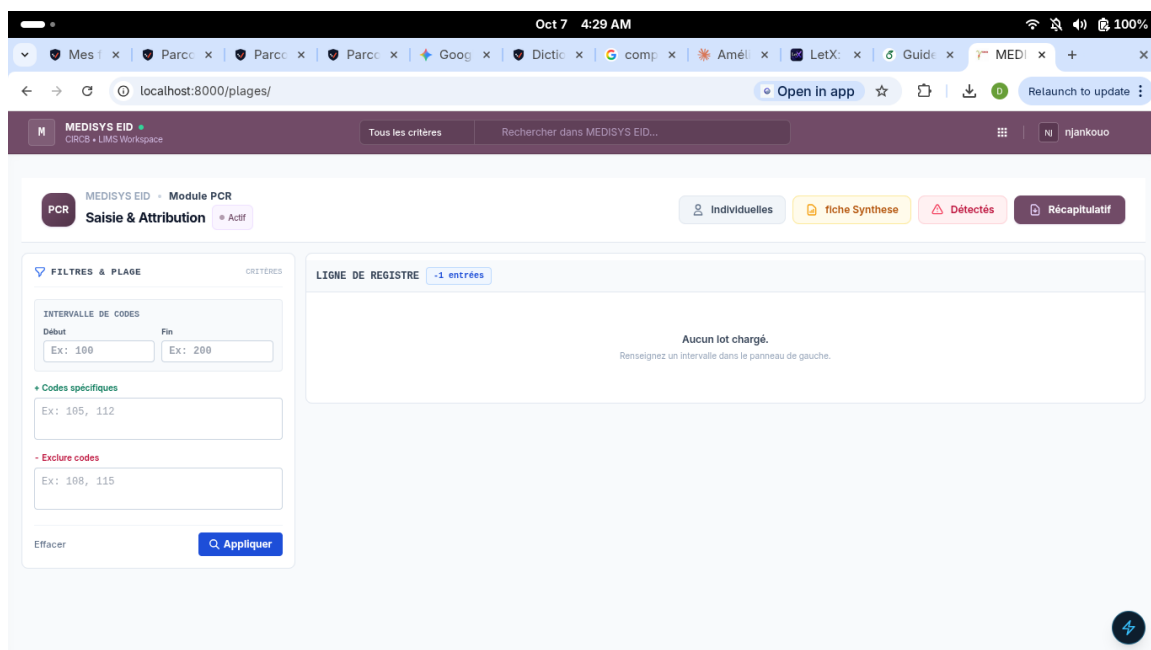


Figure 6.1 – Saisie et modification d'un résultat PCR

6.2 Consultation des résultats

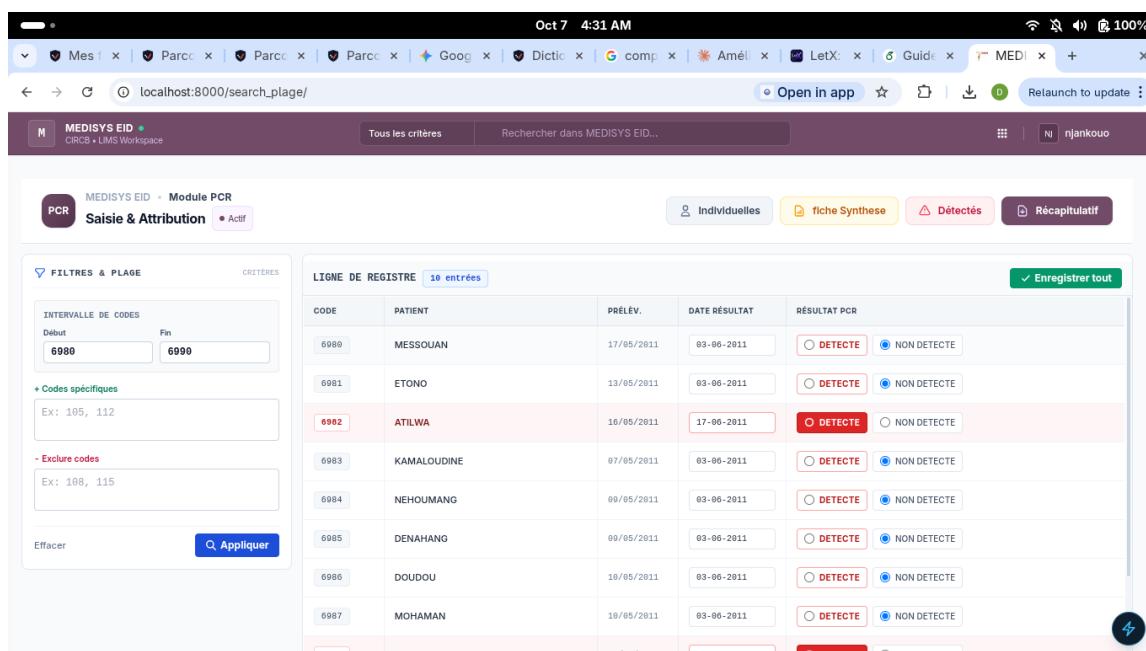


The screenshot shows the MEDISYS EID interface with the 'PCR' module selected. The 'Saisie & Attribution' tab is active. On the left, there are filters for 'INTERVALLE DE CODES' (Début: 6980, Fin: 6990) and 'Codes spécifiques' (Ex: 105, 112). The main table, titled 'LIGNE DE REGISTRE', displays 10 entries. Each row includes a CODE, PATIENT, PRÉLEV., DATE RÉSULTAT, and RÉSULTAT PCR. The RÉSULTAT PCR column has two radio buttons: 'DETECTE' (selected) and 'NON DETECTE'.

CODE	PATIENT	PRÉLEV.	DATE RÉSULTAT	RÉSULTAT PCR
6980	MESSOUAN	17/05/2011	03-06-2011	☒ DETECTE ☐ NON DETECTE
6981	ETONO	13/05/2011	03-06-2011	☒ DETECTE ☐ NON DETECTE
6982	ATILWA	16/05/2011	17-06-2011	☒ DETECTE ☐ NON DETECTE
6983	KAMALOUUDINE	07/05/2011	03-06-2011	☒ DETECTE ☐ NON DETECTE
6984	NEHOUMANG	09/05/2011	03-06-2011	☒ DETECTE ☐ NON DETECTE
6985	DENAHANG	09/05/2011	03-06-2011	☒ DETECTE ☐ NON DETECTE
6986	DOUDOU	10/05/2011	03-06-2011	☒ DETECTE ☐ NON DETECTE
6987	MOHAMAN	10/05/2011	03-06-2011	☒ DETECTE ☐ NON DETECTE
6988	ADAMA	16/05/2011	10-06-2011	☒ DETECTE ☐ NON DETECTE
6989	ADAMA	16/05/2011	10-06-2011	☒ DETECTE ☐ NON DETECTE

Figure 6.2 – Liste des patients avec résultats disponibles

6.3 Validation des résultats

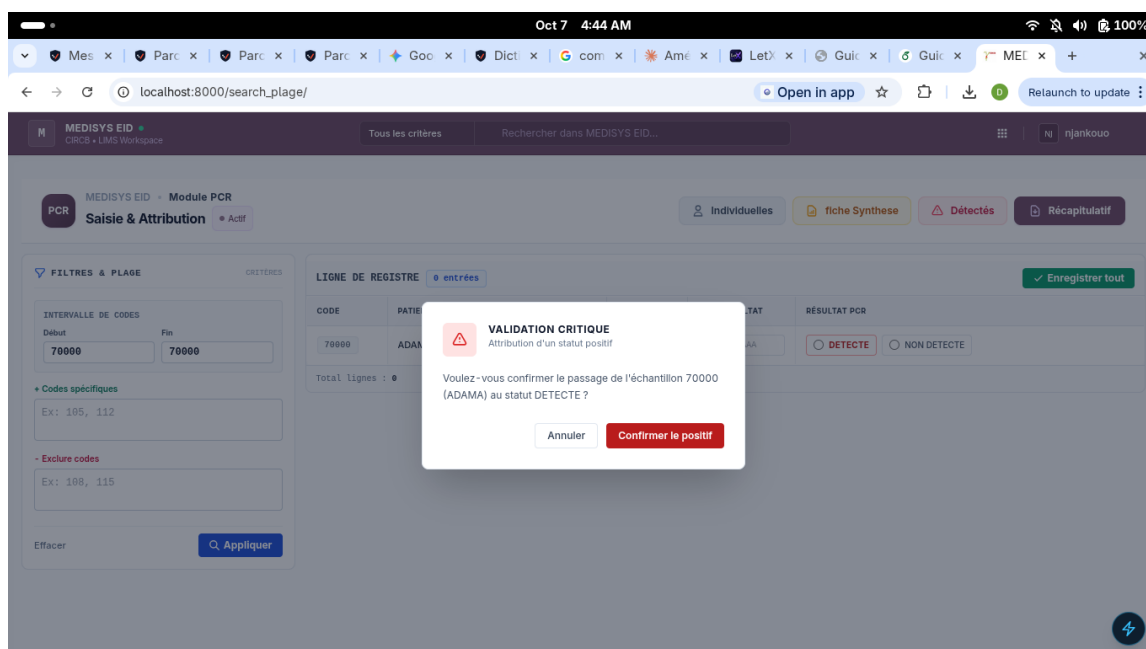

The screenshot shows the MEDISYS EID interface with the 'PCR' module selected. A validation dialog box is displayed in the center, titled 'VALIDATION CRITIQUE' with the subtitle 'Attribution d'un statut positif'. The dialog contains the text: 'Voulez-vous confirmer le passage de l'échantillon 70000 (ADAMA) au statut DETECTE ?'. There are two buttons: 'Annuler' and 'Confirmer le positif'.

Figure 6.3 – Validation d'un résultat

6.4 Édition et génération des rapports

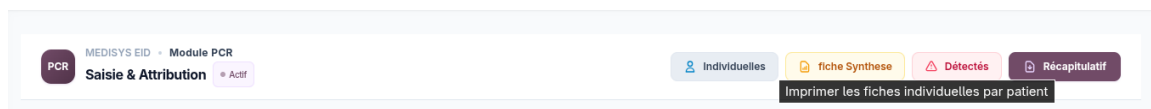


Figure 6.4 – Sélection et génération des rapports d'activité

Ressources humaines

7.1 Présentation

Le module RH permet de gérer les informations nécessaires à l'administration des utilisateurs ou des acteurs impliqués dans le système.

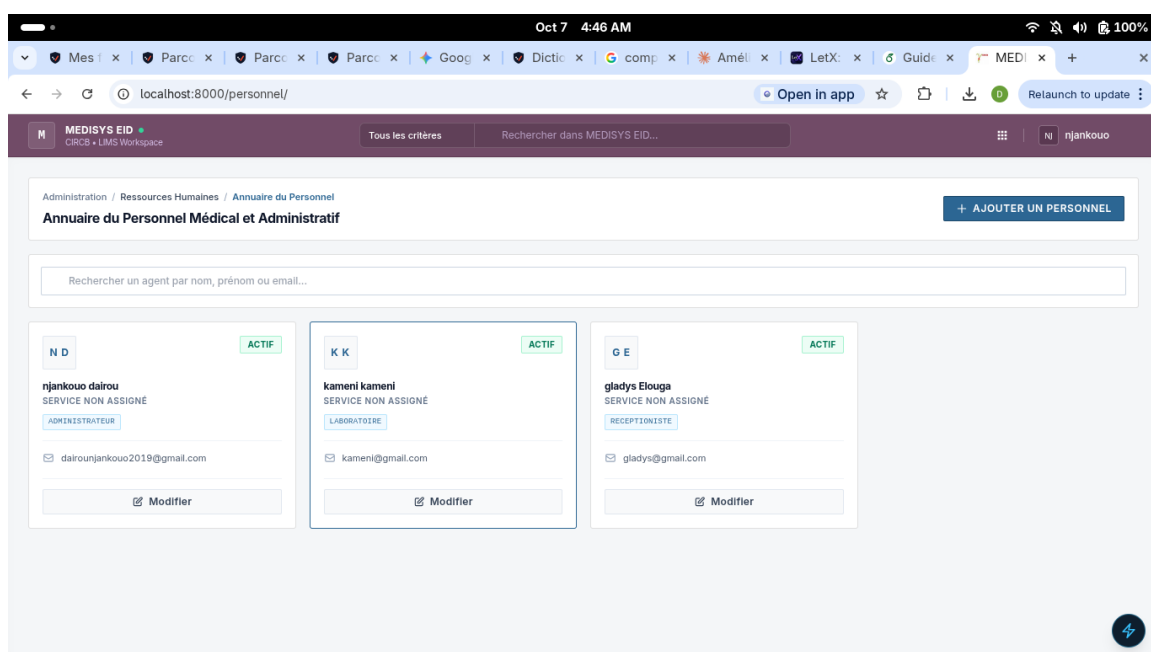


Figure 7.1 – Gestion des ressources humaines

Utilisateurs et permissions

8.1 Rôles utilisateurs

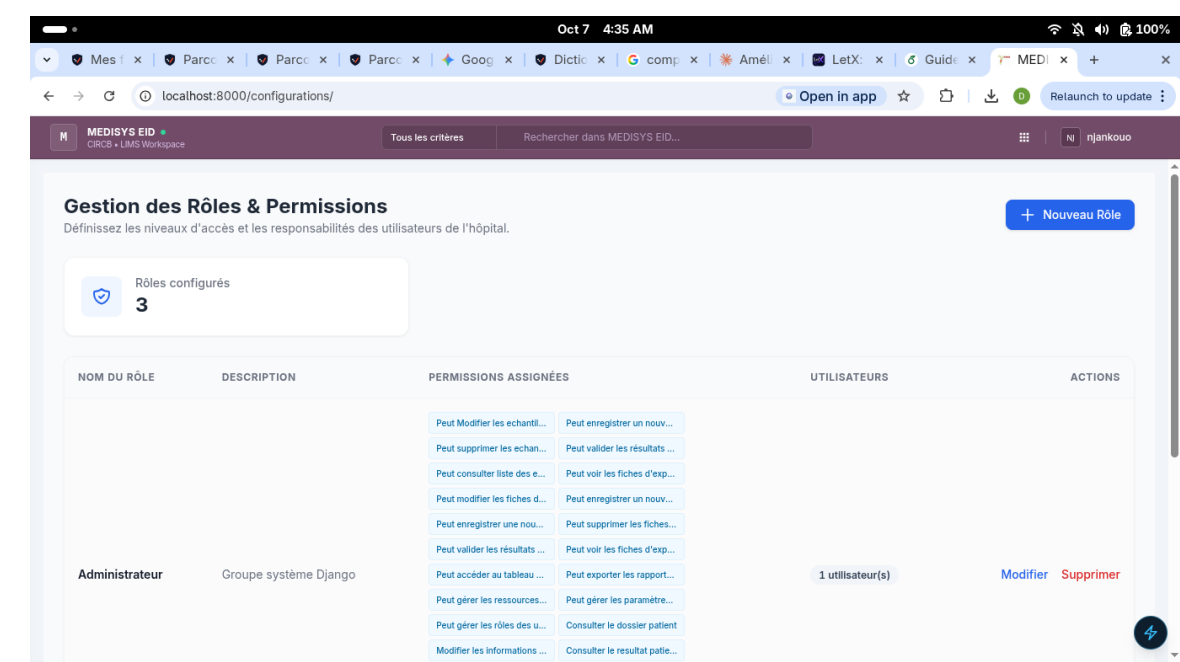


Figure 8.1 – Gestion des rôles et des comptes utilisateurs

Les fonctionnalités accessibles dans **MEDISYS EID** dépendent du rôle et des permissions attribués à chaque utilisateur.

8.2 Principe des permissions

Permission	Ce qu'elle permet
Consultation	Afficher les informations sans les modifier
Création	Ajouter de nouveaux enregistrements
Modification	Corriger ou mettre à jour des enregistrements existants
Validation	Confirmer officiellement une donnée ou un résultat
Suppression	Retirer un enregistrement
Administration	Gérer les paramètres, les utilisateurs et les droits

Bon à savoir

Le principe du moindre privilège s'applique : un utilisateur ne doit disposer que des droits nécessaires à l'accomplissement de ses responsabilités.

Bonnes pratiques

9.1 Qualité des données

- vérifier les informations avant validation ;
- éviter les doublons ;
- respecter les formats demandés ;
- renseigner les champs obligatoires ;
- signaler les anomalies ;
- ne jamais inventer une information manquante.

9.2 Sécurité et confidentialité

- conserver ses identifiants confidentiels ;
- verrouiller sa session lorsqu'on quitte son poste ;
- ne pas partager son compte ;
- se déconnecter après utilisation ;
- signaler toute activité suspecte ;
- respecter les règles de confidentialité des données patients.

Important

Les données de santé des patients sont strictement confidentielles. Ne jamais les transmettre par des canaux non autorisés (messageries personnelles, captures d'écran partagées publiquement, etc.).

Résolution des problèmes

Problème	Cause possible	Action recommandée
Impossible de se connecter	Identifiants incorrects	Vérifier les identifiants ou contacter l'administrateur.
Page inaccessible	Problème réseau ou serveur	Vérifier la connexion réseau puis contacter le support.
Données incorrectes	Erreur de saisie	Corriger les informations selon les droits disponibles.
Résultat non visible	Résultat non encore validé	Vérifier le statut du résultat.
Fonctionnalité absente	Permission insuffisante	Contacteur l'administrateur.
Patient déjà existant	Doublon potentiel	Rechercher le patient et utiliser le dossier existant.

Assistance et support

En cas de difficulté persistante, fournir au support :

1. son nom et son identifiant utilisateur ;
2. le module concerné ;
3. la date et l'heure du problème ;
4. une description précise du problème ;
5. une capture d'écran si nécessaire ;
6. le message d'erreur affiché.

Attention

Ne jamais transmettre son mot de passe dans une demande d'assistance.

Glossaire

Terme	Définition
Anomalie	Situation nécessitant une vérification ou une correction.
CIRCB	Centre International de Référence Chantal Biya.
Doublon	Dossier créé plusieurs fois pour un même patient.
EID	<i>Early Infant Diagnosis</i> : diagnostic précoce du VIH chez l'enfant.
Échantillon	Prélèvement biologique destiné à être analysé.
Fiche d'expédition	Document de suivi des échantillons envoyés au laboratoire.
FOSA	Formation sanitaire.
LIMS	<i>Laboratory Information Management System</i> .
Patient	Personne enregistrée dans le système pour laquelle des données de prise en charge sont gérées.
Permission	Droit permettant à un utilisateur d'effectuer une action donnée.
Registre de collecte	Journal des échantillons collectés.
Résultat	Information issue de l'analyse d'un échantillon.
Traçabilité	Capacité à retracer le parcours complet d'une donnée ou d'un échantillon.
Utilisateur	Personne disposant d'un compte permettant d'accéder à la plateforme.

Checklist utilisateur

- ☐ Je dispose de mes identifiants personnels.
- ☐ Je recherche un patient avant de créer un nouveau dossier.
- ☐ Je vérifie les informations de l'échantillon.
- ☐ Je vérifie les données avant validation.
- ☐ Je respecte les procédures de traçabilité.
- ☐ Je signale les anomalies.
- ☐ Je protège les informations confidentielles.
- ☐ Je me déconnecte après utilisation.